

OSK 50QG 174 リッフル式 試料縮分器

顆粒、小麦粉、粉末にも適しているリッフル式試料縮分器です。



3リッター 5リッター

【特徴】

材質は耐久性のあるステンレス製。

成果物容量、スロット数、スロット幅から最適なタイプを選択頂けます。

- ・ 2つのサイズ：3リッター, 5リッター。
- ・ 2種類のスロット数：10, 18。
- ・ 異なるスロット幅：10.3 ～ 29.0 mm。


顆粒、小麦粉、粉末にも適しています。

サンプル投入口に付属された容器からサンプルを投入することで容易且つ確実に縮分することができます。

サイズ

3 , 5リッタータイプ

寸法図

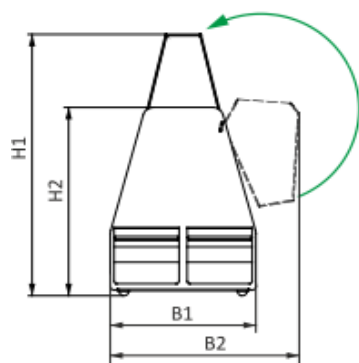


高さ (H)、幅 (B)

スロット幅の選択

最大粒径は、分割ヘッドのスロット幅の1/3から2/3が望ましい。

スロット幅	粒度
29.00mm	10-19mm
19.2mm	6-13mm
19.1mm	6-13mm
15.2mm	5-10mm
10.3mm	3-7mm

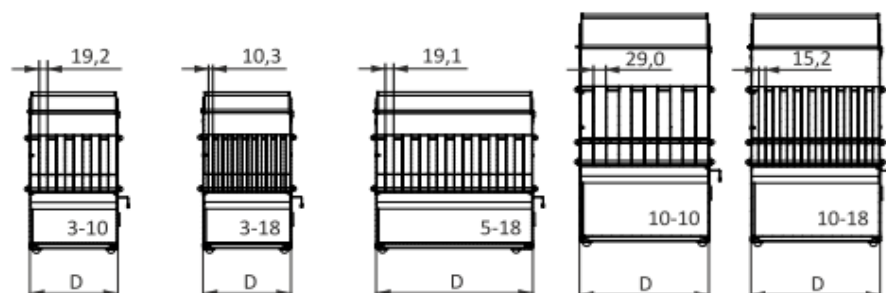

奥行 (D)、スロット数、スロット幅

【仕様】

製品No.	スロット数	スロット幅 mm	B1 mm	B2 mm	D mm	H1 mm	H2 mm	重量 k g	最大サンプル量
1745 0020	10	19.2	280	360	200	510	370	8.0	3 リッター
1745 0021	18	10.3	280	360	200	510	370	8.5	3 リッター
1745 0022	18	19.1	280	360	360	510	370	13.0	5 リッター
1745 0025	10	29	350	490	490	685	520	15.0	5 リッター

【ユーザー様からのコメント】

縮分器の性能について、均等に縮分できるのか当初は心配していましたが、実際に試験を行なってみると思った以上に少量まで均等に縮分する事ができ性能には満足しています。

(日本茶 6 4 0 g → 1 0 g への縮分) 5リッター1745 0022タイプ使用

2023年8月ご購入

【標準付属品】

- ・ OSK 50QG 174 リッフル式 試料縮分器
- ・ 試料収集コンテナ
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

【オプション】

- ・ 丸型穀刺



車両の中から、または大規模な保管施設に保管されている穀物や種子の簡単な手動サンプリング用として

製品No.	長さ	外径	重量
1720 0500	1.50 m	40 mm	1.8 kg
1720 0510	2.00 m	40 mm	2.3 kg



OSK オガワ精機株式会社

PFEUFFER 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
 ver.1.3 JUN,16, 2025